

**PRODUKTKATALOG**  
LYMPHOLOGIE

# **BAUERFEIND.**

## VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN. FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT.

Die Bauerfeind AG ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Mit unseren Produkten bringen wir Menschen in Bewegung und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

### **MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ**


Seit Jahrzehnten entwickeln wir Kompressionsprodukte für phlebologische und lymphologische Krankheitsbilder. Das verbinden wir mit ungebremstem Engagement in Produktion und Service sowie Ideenreichtum in der Entwicklung.

### **WIRKSAME VIELFALT**

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten VenoTrain curaflow können wir unsere Lymph-Patienten mit acht Farbvarianten (Caramel, Marine, Anthrazit, Schwarz, Creme, Bordeaux, Orange, Royal) und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen. Therapeutische Vorzüge sind der hohe Mikrofaser-Anteil im Gestrick, flache Sensitivnähte und spezielle Komfortzonen wie die extraweiche Kniekehle.

Der flachgestrickte Kompressionsstrumpf VenoTrain delight kommt bei fortgeschrittenen venösen Beschwerden sowie bei Lymphödemen im Stadium 1 zum Einsatz. Das atmungsaktive Zweizuggestrick ist frei von Latex, hautverträglich und leicht an- und abzulegen. An allen Abschlussbündchen verhindert die gripRelief-Struktur mit reduziertem Druck unangenehmes Einschnüren.

Unser rundgestrickter Kompressionsstrumpf VenoTrain impuls kombiniert viele Vorteile: Mit atmungsaktiver Mikrofaser und kräftigem Kompressionsfaden bietet er einzigartigen Tragekomfort bei hohem Wirkungsgrad. Den therapeutisch erforderlichen Druck entfaltet er bereits bei geringer Bewegung.

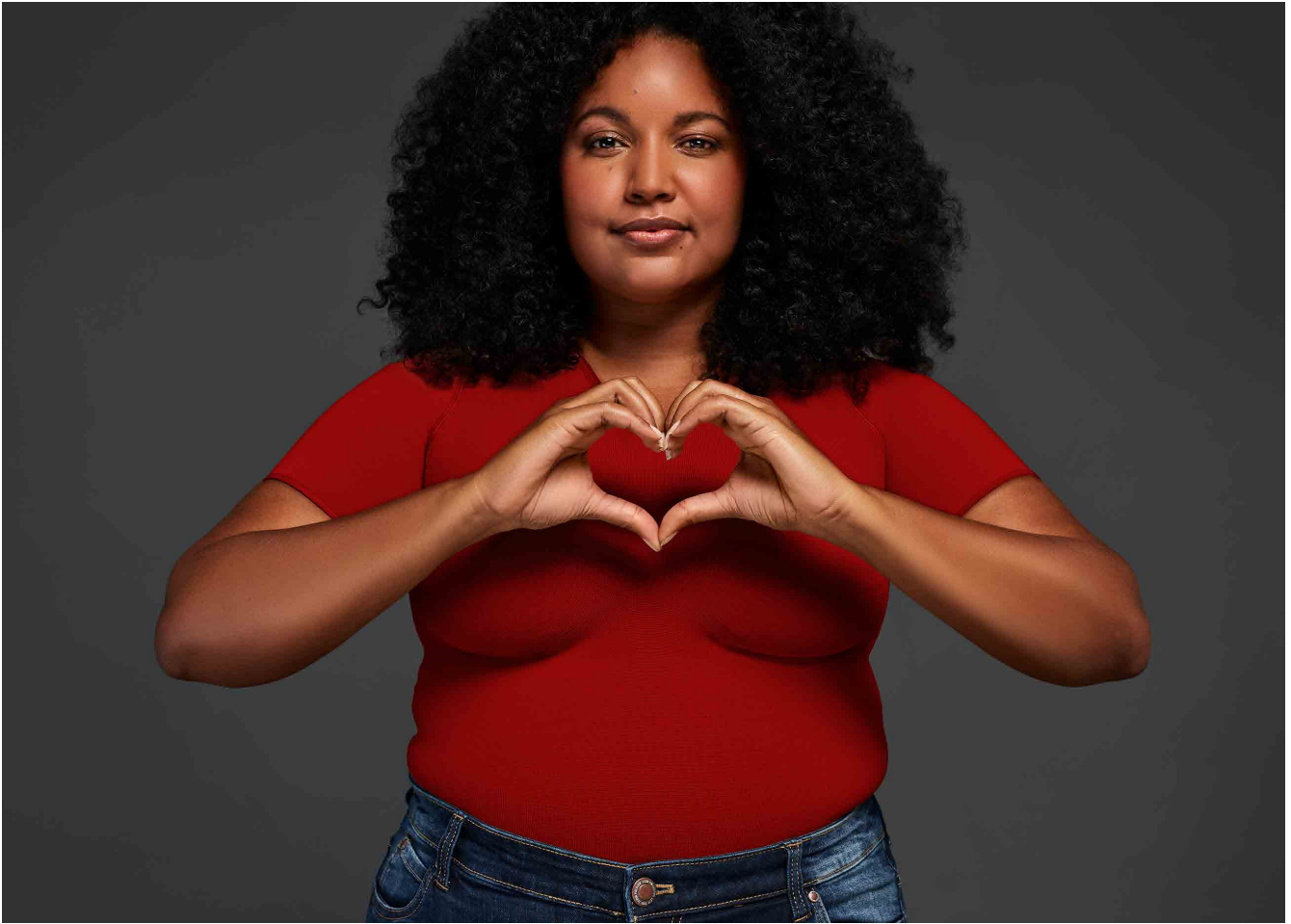

## INHALT

4	<b>Service &amp; Qualität</b>				
6	<b>Produkteigenschaften</b>				
8	<b>Farbsystematik</b>				
9	<b>Akademie</b>				
					
		<b>BEIN &amp; FUSS</b>	<b>ARM &amp; HAND</b>	<b>THORAX</b>	
11	Versorgungssystematik	11	Versorgungssystematik	36	<b>VenoTrain curaflow</b>
12	<b>VenoTrain impuls</b>	12	<b>VenoTrain soft</b>		Maßprodukt
	Serien- & Maßprodukt		Serienprodukt		+ Zusätze
14	<b>VenoTrain delight</b>	14	<b>VenoTrain curaflow</b>		
	Maßprodukt + Zusätze		Maßprodukt + Zusätze		
18	<b>VenoTrain curaflow</b>				
	Maßprodukt + Zusätze				
<hr/>					
40	<b>ZUBEHÖR</b>				
<b>VERORDNUNG &amp; BESTELLUNG</b>					
42	<b>Änderungen   Reparaturen</b>				
44	<b>Hilfsmittelnummern</b>				
46	<b>Rezeptbeispiele   Verordnungsempfehlung</b>				
49	<b>Bestellblöcke</b>				


# DER BAUERFEIND-SERVICE

## DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

### KUNDENSERVICE LYMPHOLOGIE

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich beraten. Telefonisch stehen wir Ihnen gern von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen uns 24 Stunden täglich per E-Mail und Fax.

**T 0800 001 05 60**  
**F 0800 001 05 65**  
**E [info@bauerfeind.com](mailto:info@bauerfeind.com)**

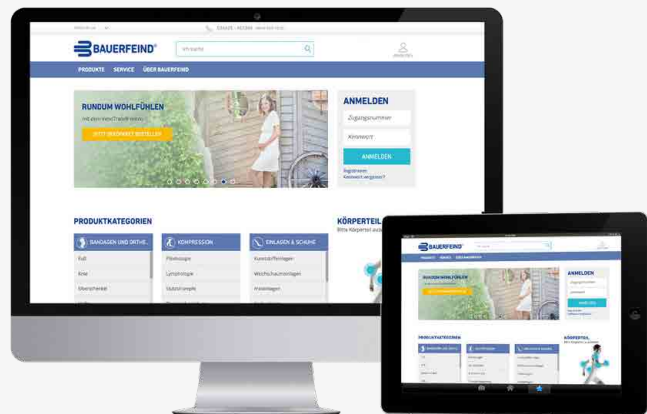

**BAUERFEIND  
ONLINESHOP**  
[experts.bauerfeind.com](http://experts.bauerfeind.com)

## SERVICE-GARANTIEN FÜR FACHHÄNDLER IN DEUTSCHLAND



### KOSTENFREIE TELEFON- UND FAXHOTLINE

Wir sind gern für Sie da!



### 100 PROZENT ERREICHBAR

Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch gern zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und elektronische Bestellsysteme erreichen Sie uns rund um die Uhr (Systemstörungen und Wartungsarbeiten ausgenommen).



### ELEKTRONISCHE BESTELLSYSTEME

Bestellen Sie einfach, schnell und mit reduzierten Versandkosten: Per wheel-it oder unserem Online-Shop mit vielfältigen Funktionen, wie z. B. dem Bestellstatus und der Verfügbarkeitsanzeige.



### VERSAND AM GLEICHEN ARBEITSTAG

Sie bestellen bis 15.00 Uhr – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Express-Wünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab.



### EXPRESS-FERTIGUNG FÜR SCHNELLE VERSORGUNG

Eilige Maßaufträge von VenoTrain impuls (Caramel), die Sie bis 10.00 Uhr beauftragen, fertigen und versenden wir noch am gleichen Arbeitstag.



### GENAUER LIEFERTERMIN

Zu Ihren Bestellungen nennen wir Ihnen den genauen Liefertermin.



### KEINE VERSANDKOSTEN

Bei einem Auftragswert über 200,00€, sowie für Maßanfertigungen, übernehmen wir die Versandkosten. Sie können sortimentsübergreifend alle Artikel in einem Auftrag bestellen.



### KOSTENFREIE WARENABHOLUNG

Sie faxen uns das ausgefüllte Rücksendeformular und wir holen nach Prüfung die Ware ab – auf unsere Kosten.



### 365 TAGE WARENÜCKNAHME

Einwandfreie Lagerware nehmen wir innerhalb von 365 Tagen nach Lieferung laut AGB zurück.



### RETouRENBearBEITUNG IN FÜNF TAGEN

Wir bearbeiten Ihre Retoure innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Wareneingang.



## KOMPROMISSLOSE PRODUKTQUALITÄT



Unsere VenoTrain-Kompressionsstrümpfe decken alle Anwendungsbereiche der modernen Kompressionstherapie ab. Sie zeichnen sich durch medizinisch bestätigte Wirksamkeit und einzigartige Materialeigenschaften aus.

Durch das Angebot einer breiten Farbpalette fügen sich die Kompressionsprodukte nahtlos in den Alltag ihrer Benutzer ein und lassen sich mit unterschiedlichen modischen Vorlieben kombinieren. Als Präventionsmaßnahme bis zur Versorgung von Lymphödemen: die indikationsgerechten Versorgungen umfassen vielfältige rund- und flachgestrickte Ausführungen in Maß und Serie.

Alle VenoTrain-Produkte entsprechen den Anforderungen des Medizinproduktegesetzes (MPG) und tragen das RAL-Gütezeichen. Der Standard 100 by Oeko-Tex® garantiert als Qualitätssiegel eine Prüfung auf Schadstoffe.



# ZUVERLÄSSIGES ZUSAMMENSPIEL

## ANWENDER SAGEN\*



### ANGENEHM!

#### DAS MATERIAL


Das Venotrain curaflow-Material erhielt zu 90 Prozent die Bewertung gut bis sehr gut.



### PASSEND!

#### DIE PASSFORM

91 Prozent der Befragten beurteilte die Passform ihrer Venotrain curaflow-Kompressionsstrümpfe mit gut bis sehr gut.

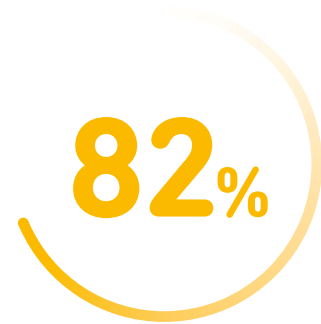

### PRAKTISCH!

#### DAS ANLEGEN

Ebenfalls mit gut und sehr gut bewerteten 82 Prozent das Anlegen ihrer Venotrain curaflow-Versorgung.

\* Quelle: Ergebnis einer Patientenbefragung zur Bewertung ihrer Venotrain curaflow-Kompressionsversorgung, Bauerfeind AG –Zeitraum März bis August 2014



## FÜR DEN ALLTAG GEMACHT



geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen und angenehmes Tragegefühl



konstanter Druck und optimaler Druckverlauf mit spürbarer Wirkung über die gesamte Tragedauer, angenehm weiches, feinmaschiges Zweizuggestrick



perfekte Passform für individuelle Körpermaße, durch anatomisch maßgefertigte Nahtware



atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Gestrick für angenehmen Tragekomfort

## VenoTrain curaflow ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN



extraweiche Kniekehle für unbeschwerte Mobilität



intelligente Längsstruktur für optimalen Lymphtransport



## DIE FARBSYSTEMATIK EINFACH. ÜBERSICHTLICH. STIMMIG.

VenoTrain®	STANDARDFARBEN				ZUSATZFARBEN			
	Caramel	Marine	Anthrazit	Schwarz	Crème	Bordeaux	Orange	Royal
								
<b>impuls</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>delight</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>curaflow</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>soft</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				



# GEBÜNDELTE LYMPH-KOMPETENZ

## BAUERFEIND-AKADEMIE

Über die Bauerfeind-Akademie können unsere Qualitätspartner den Basis- sowie Aufbauworkshop Lymphologie (Refresh- und Thoraxworkshop) buchen.

Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauerfeind-Außendienst-Mitarbeiter sowie unter »unser Trainingsangebot« auf [bauerfeind.de/akademie](https://bauerfeind.de/akademie).

Das Team der Bauerfeind-Akademie berät Sie gern persönlich zu den einzelnen Angeboten.

**T** +49 (0) 800 0 01 05 25

**E** [akademie@bauerfeind.com](mailto:akademie@bauerfeind.com)



### **BASISWORKSHOP LYMPHOLOGIE**

- medizinische Grundlagen Lymphologie und Kompressionstherapie
- komplexe physikalische Entstauungstherapie
- indikationsgerechte Versorgung mit Bauerfeind-Flachstrickprodukten
- praktisches Arbeiten direkt am Patienten (Messen und Anlegen)

### **AUFBAUWORKSHOP LYMPHOLOGIE / REFRESHWORKSHOP**

- praktisches Anmessen und Anlegen von Flachstrick-Produkten am Bein, an Arm und Hand sowie von Zusätzen wie Zehenkappe, Pelotten etc.
- Praxisworkshop direkt am Patienten

### **AUFBAUWORKSHOP THORAX**

- Grundlagen Thoraxversorgung
- indikationsgerechte Versorgung mit Bauerfeind-Flachstrickprodukten
- praktisches Arbeiten direkt am Patienten (Messen und Anlegen)



# VERSORGUNGSSYSTEMATIK

## BEIN & FUSS

### LYMPHÖDEM- & LIPÖDEM-STADIEN

Stadium 0 <b>LATENZSTADIUM</b>	Stadium 1 <b>SPONTAN REVERSIBLES STADIUM</b>	Stadium 2 <b>SPONTAN IRREVERSIBLES STADIUM</b>	Stadium 3 <b>STADIUM DER SOG. ELEPHANTIASIS</b>
			
<p>Das Lymphsystem ist geschädigt, doch liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.</p>	<p>Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken. Das Lymphödem bildet sich bei Hochlagerung der Beine wieder zurück.</p> <p>Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.</p>	<p>Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen können auftreten.</p> <p>Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.</p>	<p>Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.</p> <p>Das Gewebe ist zusätzlich derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.</p>

### PRODUKTEMPFEHLUNG

**VenoTrain impuls** Stadium 0–1

**VenoTrain delight** Stadium 0–2

**VenoTrain curaflow** Stadium 0–3

**VenoTrain impuls**  
**KOMPRESSION CCL 2–3**

- weiche Mikrofaser, geschmeidig und atmungsaktiv
- kurzzugelastisch
- rundgestrickt

**VenoTrain delight**  
**KOMPRESSION CCL 2–3**

- latexfrei und hautfreundlich
- strapazierfähig
- extra flache Nähte, flachgestrickt

**VenoTrain curaflow**  
**KOMPRESSION CCL 1–4**

- weiche Mikrofaser, geschmeidig und atmungsaktiv
- extra flache Nähte, flachgestrickt

### KOMPRESSIONSKLASSEN

**CCL 1: 18–21 MMHG**

- leichte Kompression
- leichte Oberflächenwirkung
- Versorgung von kindlichen Lymphödem, Inaktivitätsödem

**CCL 2: 23–32 MMHG**

- mittlere Kompression
- mittlere Oberflächenwirkung
- leichte Tiefenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem Arm und Bein Stadium 1 und 2, Lipödem, Lipolymphödem

**CCL 3: 34–46 MMHG**

- kräftige Kompression
- Oberflächen- und Tiefenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem Arm und Bein Stadium 2 und 3, Lipödem, Lipolymphödem

**CCL 4: AB 49 MMHG**

- extra kräftige Kompression
- starke Tiefenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Beinlymphödem Stadium 2 und 3, Lipödem und Lipolymphödem



## SERIENGRÖSSENTABELLE V6+

	UMFANG	I		II		III		IV		V		VI	
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
<b>Länge lG</b>	<b>cG</b>	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
<b>short</b> 62-70	<b>cF</b>	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
<b>long</b> 70-80	<b>cE</b>	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
<b>Typ</b> AG													
<b>Länge lD</b>	<b>cD</b>	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
<b>short</b> 35-40	<b>cC</b>	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
<b>long</b> 40-44	<b>cB1</b>	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
<b>Typ</b> AD													
	<b>cB</b>	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
	<b>cY</b>	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
	<b>cA</b>	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	

# VenoTrain® impuls

## KRAFTVOLL BEI BEGINNENDEN LYMPHÖDEMEN

Bereits bei geringer Muskelbewegung entfaltet der VenoTrain impuls besondere Tiefenwirkung durch seinen hohen Arbeitsdruck.

Dank Mikrofaser bietet er eine kraftvolle Unterstützung, bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Er ist leicht anzulegen und atmungsaktiv.

Hochwirksam bei fortgeschrittenen Venenleiden, post-thrombotischem Syndrom, zur Nachsorge abgeheilter Ulcera sowie bei Lymphödemem im Anfangsstadium (0–1).

### BESONDERHEITEN

- das kurzzugelastische Gestrick sorgt für einen hohen Arbeitsdruck bereits bei geringer Muskelbewegung
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- hochdifferenziertes Größensystem V6+ (I–VI)
- Expressfertigung Maß in Farbe Caramel

### STANDARDFARBEN



### DETAILS

#### GRÖSSENSYSTEMATIK V6+ (I–VI)

#### KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 2 (23–32 mmHg)
- Ccl 3 (34–46 mmHg)

#### FUSSSPITZE geschlossen, offen

#### MATERIALZUSAMMENSETZUNG







- Ccl 2: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
- Ccl 3: 75 % Polyamid, 25 % Elasthan

#### PFLEGEHINWEISE



### ● SERIE

### ○ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	 AD	 AG	 AGHB	 AT	 ATH	 ATX
Trikotrand	● ○			○	○	○
Noppe	● ○	● ○				
Hüftbefestigung			● ○			

\* Auslieferung von Serienanfertigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen

🕒 Express-Fertigung für Maßstrümpfe: Wenn Sie bis 10 Uhr bestellen, fertigen und versenden wir noch am gleichen Tag.



# VenoTrain® delight

## FÜR EINE INTENSIVE THERAPIE

Erhältlich als flachgestrickter Beinstrumpf mit hautverträglichen, latexfreien Materialien und hoher Passformstabilität.

Zur Versorgung fortgeschrittener venöser sowie lymphologischer Beschwerden. Der VenoTrain delight ist in vielfältigen Ausführungen erhältlich.

### FARBEN

CARAMEL



SCHWARZ



### BESONDERHEITEN

- Tiefenwirkung auf das Venensystem
- atmungsaktives Zweizuggestrick
- spezielle gripRelief®-Struktur des Bündchens für komfortablen und sicheren Halt
- extra flache Nähte

### DETAILS

#### GRÖSSENSYSTEMATIK Maß

#### KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 2 (23–32 mmHg)
- Ccl 3 (34–46 mmHg)

**FUSSSPITZE** offen, schräg offen, geschlossen

#### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 2: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
- Ccl 3: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan

#### PFLEGEHINWEISE



### ○ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AF	AG	AGHB	AT	BD	BG	CG	CT	DG	ET
Trikot	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hüftbefestigung				<input type="checkbox"/>							
<b>ZUSATZ</b>											
T-Ferse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
viskoelastische Pelotten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

# VenoTrain® delight

## ZUSÄTZE BEIN & FUSS



01

**01**

### FUSS SCHRÄG OFFEN

#### PATIENTENSITUATION

- Ödematöse Fußrücken
- Zehenfehlstellungen
- Erkrankungen von Haut und Nagel im Zehenbereich

#### WIRKUNG

- erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform

**02**

### FUSS GERADE GESCHLOSSEN

#### PATIENTENSITUATION

- Ödematöse Fußrücken
- Zehen- und Fußfehlstellungen
- schmaler konischer Fuß Richtung Ferse

#### WIRKUNG

- kein Rutschen des Fußes bzw. der Ferse nach hinten
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

**03**

### T-FERSE

#### PATIENTENSITUATION

- Hautfalten bei Y
- ausgeprägte anatomische Ferse

#### WIRKUNG

- keine Faltenbildung an Ferse und Fußbeuge
- verbesserter Kompressionsverlauf im Knöchelbereich
- bessere Gelenkfunktionalität




02




03



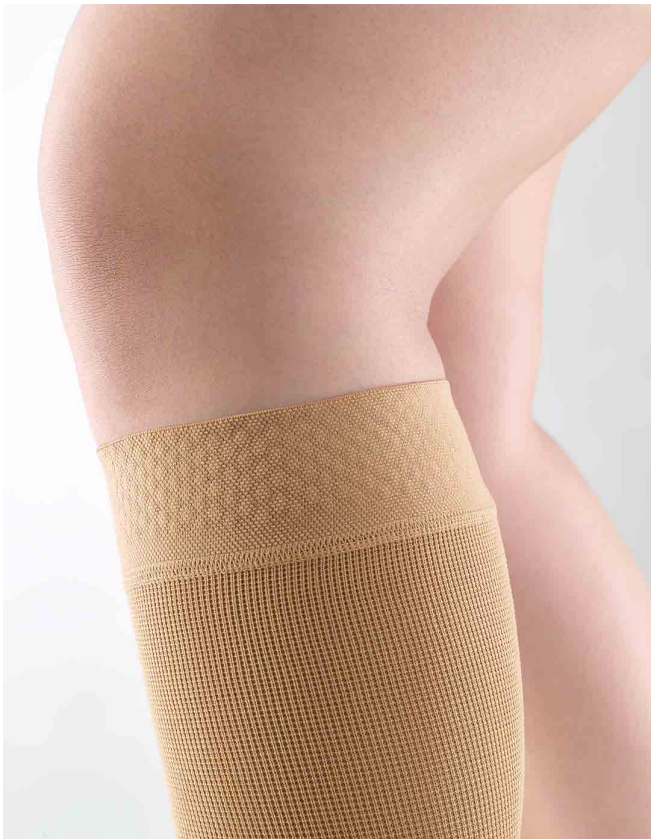

04

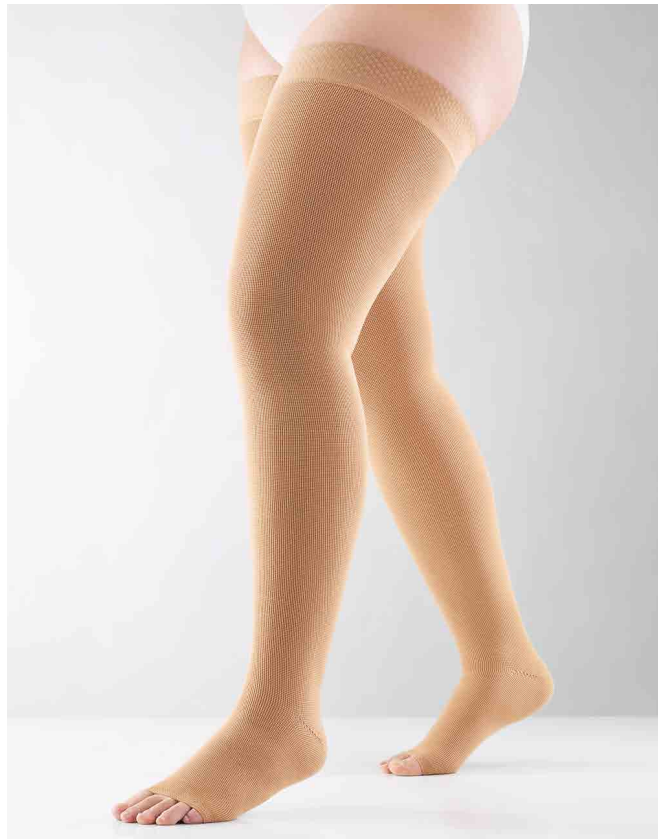

04

#### 04 NOPPENHAFTBAND

##### PATIENTENSITUATION

- grundsätzlich bei allen Kompressionsstrümpfen zur Befestigung erforderlich

##### WIRKUNG

- Halt der Kompressionsbestrumpfung
- anwenderfreundlich

#### 05 PELOTTE

##### PATIENTENSITUATION

- Ödeme und Verhärtungen im Knöchelbereich

##### WIRKUNG

- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen



05



# VenoTrain® curaflow


## FÜR DIE LYMPH- UND LIPÖDEM-THERAPIE

Einzigartig durch hohen Anteil innovativ verarbeiteter Mikrofaser. Extra flache Sensitivnähte sowie spezielle Komfortzonen garantieren höchsten Tragekomfort in der Flachstrick-Versorgung.


### BESONDERHEITEN

- geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- extra weiche Fußspitze
- anatomische, extra weiche Kniekehle für volle Bewegungsfreiheit
- Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

### MASSANFERTIGUNG

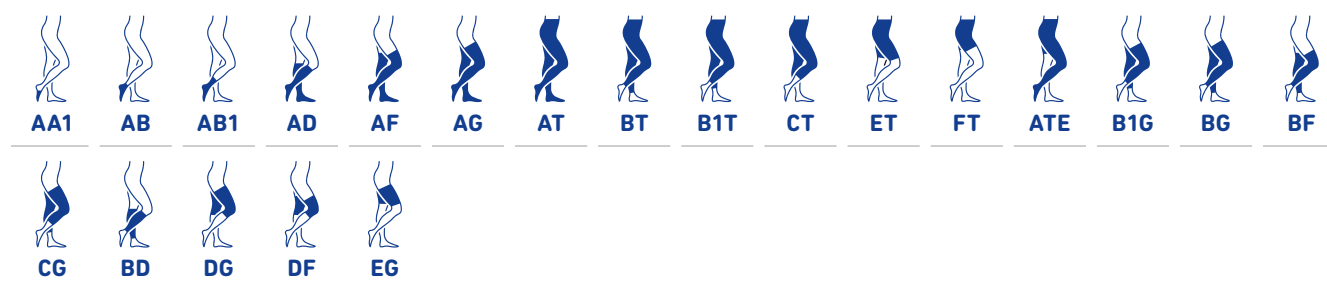

### STANDARDFARBEN

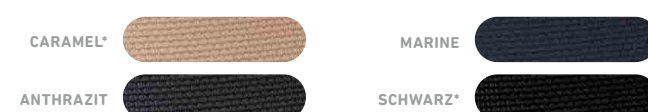

### ZUSATZFARBEN



### DETAILS

#### GRÖSSENSYSTEMATIK Maß

#### KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 1 (18–21 mmHg) bis Ccl 4 (ab 49 mmHg)

**FUSSSPITZE** offen, schräg offen, geschlossen, schräg geschlossen

#### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 1–2: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan
- Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan
- Ccl 4: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan

#### ZEHENKAPPE NAHTLOS

- Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
- Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan
- Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan

#### ZEHENKAPPE MIT NAHT

- Ccl 1–2: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan
- Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

#### PFLEGEHINWEISE



# VenoTrain® curaflow

## ZUSÄTZE BEIN & FUSS

VenoTrain curaflow ermöglicht durch Maßfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab. Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produktkombinationsmöglichkeiten. Weitere Zusätze können Sie in unserer aktuellen Preisliste nachschlagen.



01



02

### 01 FUSS SCHRÄG GESCHLOSSEN

#### PATIENTENSITUATION

- Ödematöse Fußrücken
- Zehen- und Fußfehlstellungen
- schmaler konischer Fuß Richtung Ferse

#### WIRKUNG

- erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform
- kein Rutschen des Fußes / Ferse nach hinten
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

### 02 FUSS GERADE GESCHLOSSEN

#### PATIENTENSITUATION

- ödematöser Fußrücken bei relativ gerader Zehenlinie
- Fuß nicht konisch

#### WIRKUNG

- kein Rutschen des Fußes / Ferse nach hinten
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

### 03 FUSS SCHRÄG OFFEN

#### PATIENTENSITUATION

- ödematöser Fußrücken
- Zehenfehlstellungen
- Erkrankungen von Haut und Nagel im Zehenbereich

#### WIRKUNG

- erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform

### 04 90°-FERSE

#### PATIENTENSITUATION

- Hautfalten bei Y
- ausgeprägte anatomische Ferse
- Rollstuhlfahrer

#### WIRKUNG

- keine Faltenbildung an Ferse und Fußbeuge
- verbesserter Kompressionsverlauf im Knöchelbereich
- bessere Gelenkfunktionalität

### 05 SPANNERWEITERUNG

#### PATIENTENSITUATION

- Überhänge bei Y
- Lymphödem Stadium Ende 2 / Beginn 3

#### WIRKUNG

- geringerer Druck auf die Fußhebersehne
- verbesserter Kompressionsverlauf am Fußrücken

### 06 HALLUX

#### PATIENTENSITUATION

- Schiefstand des Großzehs (Hallux valgus)

#### WIRKUNG

- optimale Passform im Halluxbereich
- Druckentlastung



03



04



05



06



07

**07  
KNEIZONE (STANDARD  
BEI ALLEN BEINVERSOR-  
GUNGEN MIT KNEE)**

**PATIENTENSITUATION**

- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten

**WIRKUNG**

- extraweiche Kniekehle für verminderte Faltenbildung
- anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalitäten

**08  
ABSCHLUSS SCHRÄG**

**PATIENTENSITUATION**

- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten
- konische anatomische Form
- weiches Hautgewebe

**WIRKUNG**

- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfbereich (AD und AG möglich)
- anatomische Passform



08

**09  
NOPPENHAFTBAND**

**PATIENTENSITUATION**

- grundsätzlich bei allen Kompressionsstrümpfen zur Befestigung erforderlich

**WIRKUNG**

- Halt der Kompressionsbestrumpfung



08

**10  
STREIFENHAFTBAND**

**PATIENTENSITUATION**

- bietet stärkeren Halt; geeignet bei festerem Ödem und großen Umfängen

**WIRKUNG**

- Halt der Kompressionsbestrumpfung

**11  
HAFTBANDSTÜCK**

**PATIENTENSITUATION**

- ausgeprägte konische Beinform
- sehr weiches Gewebe

**WIRKUNG**


- zusätzlicher Halt



09



09

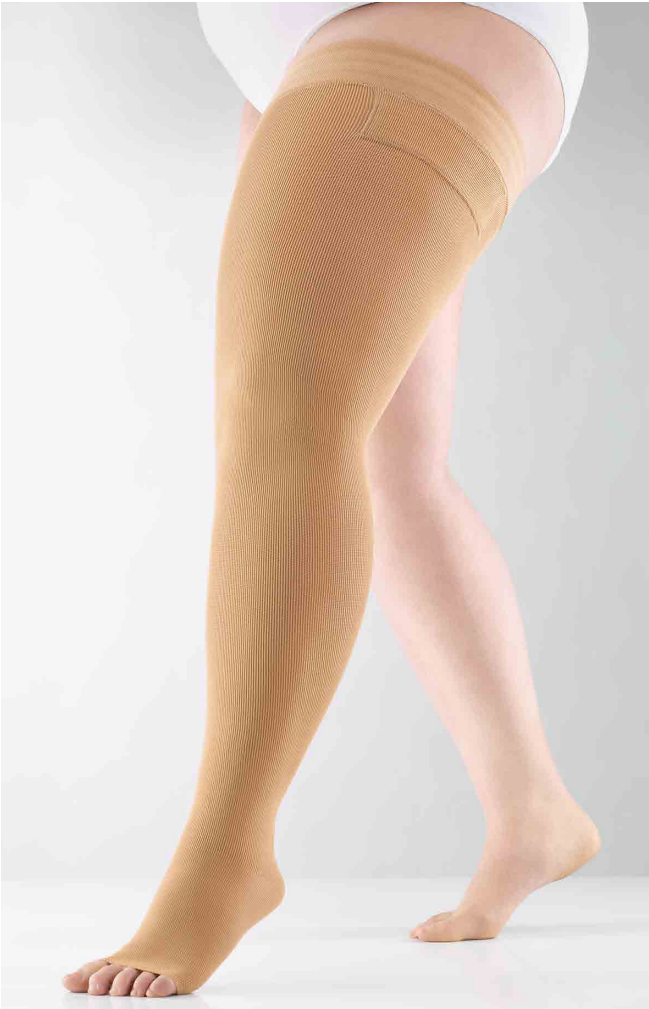

10



11



12

## 12 HÜFTBEFESTIGUNG PATIENTENSITUATION

- Haftbandunverträglichkeit
- ### WIRKUNG
- Halt der Kompressionsbestrumpfung

## 13 REISSVERSCHLUSS PATIENTENSITUATION

- Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Inkontinenz etc.

### WIRKUNG

- erleichtert das passgerechte An- und Ablegen der Versorgung

## 14 ATU-ZWICKEL PATIENTENSITUATION

- Schwangerschaft

### WIRKUNG

- verbesserte Passform des Leibteils
- verminderte Kompression im Bereich des Leibes

## 15 HERRENZWICKEL STANDARD

- Strumpfhosen für die Herrenversorgung

### WIRKUNG

- verbesserte Passform des Leibteils

## 16 LOCH-DURCHZUGGUMMI (STANDARD)

### PATIENTENSITUATION

- schwankende Umfänge im Taillenbereich
- Schwangerschaft
- Asthmatiker

### WIRKUNG

- verstellbare Weite im Taillenbereich
- Anpassung an veränderte Körperformen

## 17 TAILLENBAND

### PATIENTENSITUATION

- für alle Strumpfhosenversorgungen

### WIRKUNG

- perfekte Passform ohne Auftragen

## 18 PELOTTE EINGEARBEITET PATIENTENSITUATION

- Ödeme und Verhärtungen im Knöchelbereich

### WIRKUNG

- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen

## 19 LYMPHPAD EINGEARBEITET PATIENTENSITUATION

- lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung
- Abweichungen vom anatomischen Standard

### WIRKUNG

- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen

## 20 ZEHENKAPPE

### PATIENTENSITUATION

- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme
- Fußrückenödeme

### WIRKUNG

- Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich

## 21 ANGENÄHTE ZEHENRINGE PATIENTENSITUATION

- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme
- Fußrückenödeme

### WIRKUNG


- Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich
- keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil



13




14

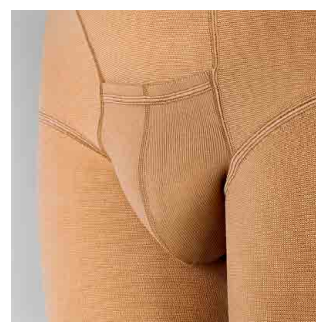


15



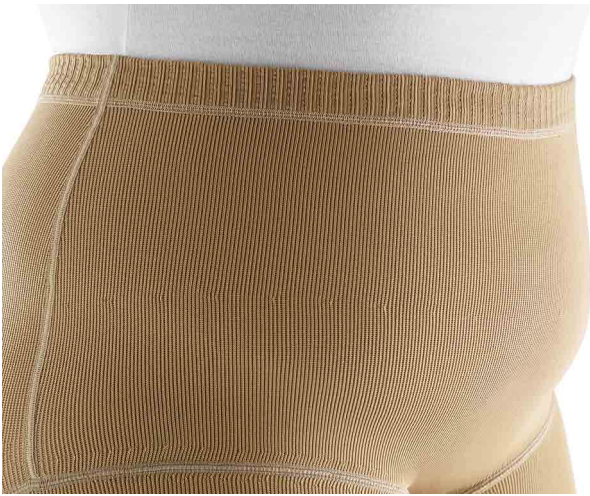

16

17

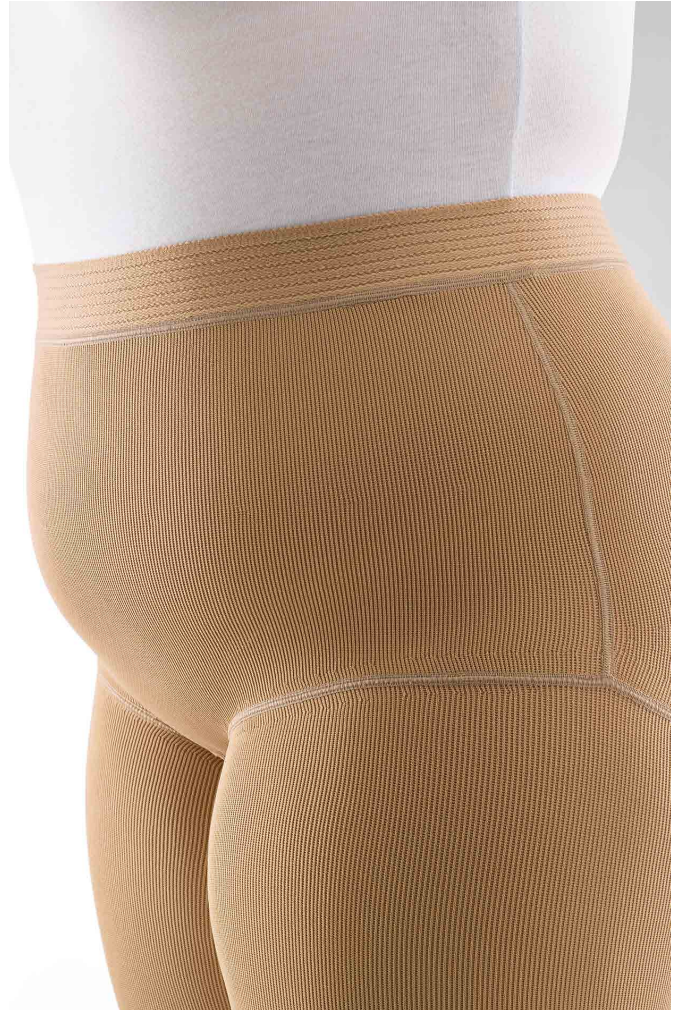

18



20



19



21



# VERSORGUNGSSYSTEMATIK

## ARM & HAND

### LYMPHÖDEM- & LIPÖDEM-STADIEN

#### Stadium 0 LATENZSTADIUM

Das Lymphsystem ist geschädigt, doch liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.

#### Stadium 1 SPONTAN REVERSIBLES STADIUM

Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.

Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.

#### Stadium 2 SPONTAN IRREVERSIBLES STADIUM

Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.

Die Hautoberfläche ist uneben und Fettstruktur grobknotig.

#### Stadium 3 STADIUM DER SOG. ELEPHANTIASIS

Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

Das Gewebe ist zusätzlich derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettablappen.

### PRODUKTEMPFEHLUNG

**VenoTrain soft** Stadium 0–1

**VenoTrain curaflow** Stadium 0–3

#### **VenoTrain soft Arm** KOMPRESSION CCL 1, CCL 2

- Komfort-Ellenbeuge für mehr Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und weniger Druckempfinden
- spürbare Wirksamkeit über die gesamte Tragedauer
- hautfreundlich, weich und atmungsaktiv

#### **VenoTrain curaflow** KOMPRESSION CCL 1–3

- weiche Mikrofaser, geschmeidig und atmungsaktiv
- extra flache Nähte, flachgestrickt

### KOMPRESSIONSKLASSEN

#### **CCL 1: 18–21 MMHG**

- leichte Kompression
- leichte Oberflächenwirkung
- Versorgung von kindlichen Lymphödem, Inaktivitätsödem

#### **CCL 2: 23–32 MMHG**

- mittlere Kompression
- mittlere Oberflächenwirkung
- leichte Tiefenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Arm-Lymphödem und Bein Stadium 1 und 2, Lipödem, Lipolymphödem


#### **CCL 3: 34–46 MMHG**

- kräftige Kompression
- Oberflächen- und Tiefenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Arm-Lymphödem Stadium 2 und 3, Lipödem, Lipolymphödem



### SERIENGRÖSSENTABELLE VenoTrain® soft Arm

**Länge /D**  
**short** 39–44  
**long** 44,1–50  
**Typ** CG

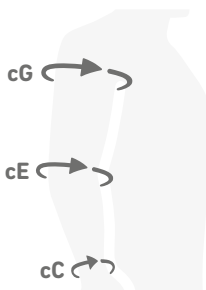

UMFANG	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
	MIN. – MAX.	MIN. – MAX.	MIN. – MAX.	MIN. – MAX.
<b>cG</b>	24 – 30	27 – 33	29 – 36	32 – 40
<b>cE</b>	22 – 26	24 – 29	27 – 32	30 – 35
<b>cC</b>	14 – 15	15 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20

# VenoTrain® soft

## BEWEGLICHKEIT IM ALLTAG

Nahtlos mit extra weicher Ellenbeuge.  
Dies schafft Beweglichkeit im Alltag bei voller  
medizinischer Wirksamkeit.

### FARBEN



### BESONDERHEITEN

- Komfort-Ellenbeuge für mehr Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und
- weniger Druckempfinden
- spürbare Wirksamkeit über die gesamte Tragedauer
- hautfreundlich, weich und atmungsaktiv

### DETAILS

**GRÖSSENSYSTEMATIK** VenoTrain soft Arm (S–XL)

#### KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

#### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 1: 74 % Polyamid, 26 % Elasthan
- Ccl 2: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

#### PFLEGEHINWEISE



### • SERIE

#### ABSCHLUSS HAFTBAND






Trikotrand



Noppe



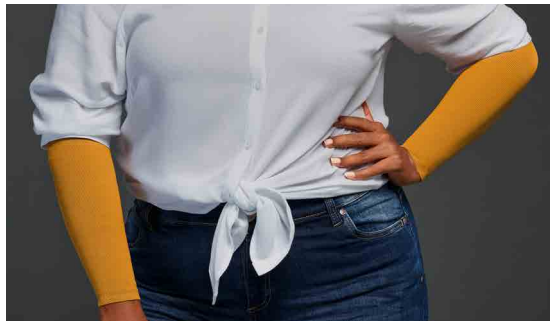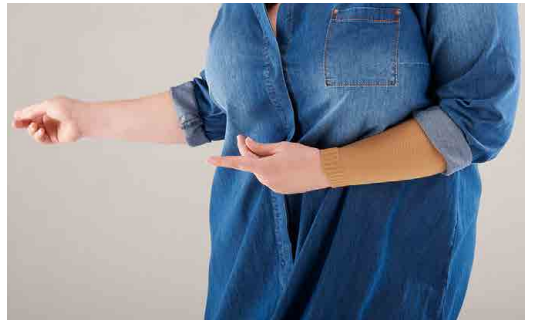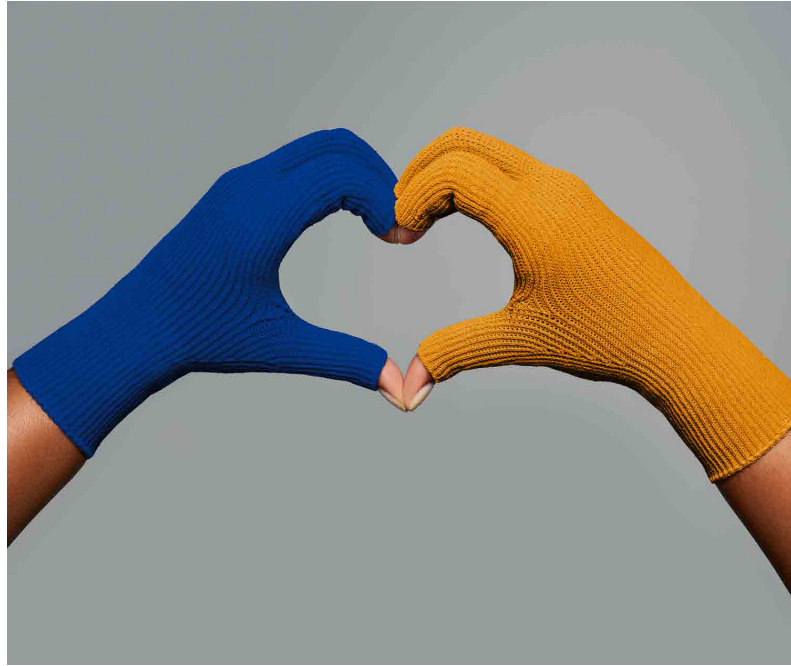

# VenoTrain® curaflow

## FÜR DIE LYMPH- UND LIPÖDEM-THERAPIE


### ARM & HAND

Einzigartig durch hohen Anteil innovativ verarbeiteter Mikrofaser. Extra flache Sensitivnähte sowie spezielle Komfortzonen garantieren höchsten Tragekomfort in der Flachstrick-Versorgung.

#### BESONDERHEITEN

- geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- anatomisch geformter, extra weicher Ellenbogenbereich für mehr Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und weniger Druckempfinden
- Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

#### STANDARDFARBEN

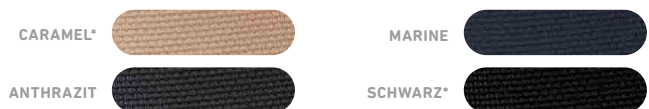

#### ZUSATZFARBEN



#### DETAILS

##### GRÖSSENSYSTEMATIK Maß

##### KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 1: (18 – 21 mmHg) bis Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

##### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

##### ARM

- Ccl 1: 77 % Polyamid, 23 % Elasthan
- Ccl 2: 77 % Polyamid, 23 % Elasthan
- Ccl 3: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan

##### HAND NAHTLOS

- Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
- Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan
- Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan


##### HAND MIT NAHT

- Ccl 1: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan
- Ccl 2: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan
- Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

##### PFLEGEHINWEISE



#### MASSANFERTIGUNG

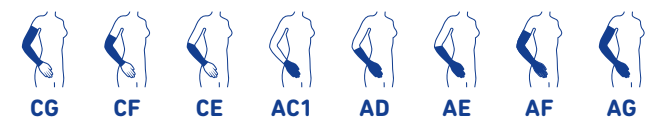

# VenoTrain® curaflow

## ZUSÄTZE ARM & HAND

VenoTrain curaflow ermöglicht durch Maßfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab. Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produktkombinationsmöglichkeiten. Weitere Zusätze können Sie in unserer aktuellen Preisliste nachschlagen.



01



02

**01****ARMZONE (STANDARD FÜR ALLE ARMVERSORGUNGEN) PATIENTENSITUATION**

- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten

**WIRKUNG**

- Komfort-Ellenbeuge für verminderte Faltenbildung
- anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalität

**02****ABSCHLUSS SCHRÄG PATIENTENSITUATION**

- grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patienten
- konische anatomische Form
- weiches Hautgewebe

**WIRKUNG**

- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfbereich
- anatomische Passform
- Vermeidung von zirkulären Abschnürungen





03 03

**03****NOPPENHAFTBAND****PATIENTENSITUATION**

- bei weichem Gewebe zur Befestigung erforderlich

**WIRKUNG**

- Halt der Kompressionsbestrumpfung
- anwenderfreundlich

**STREIFENHAFTBAND****PATIENTENSITUATION**

- bei weichem Gewebe zur Befestigung erforderlich

**WIRKUNG**


- Halt der Kompressionsbestrumpfung

**04****HAFTBANDSTÜCK****PATIENTENSITUATION**

- ausgeprägte konische Armform
- sehr weiches Gewebe

**WIRKUNG**

- zusätzlicher Halt
- Verhinderung des Rutschens

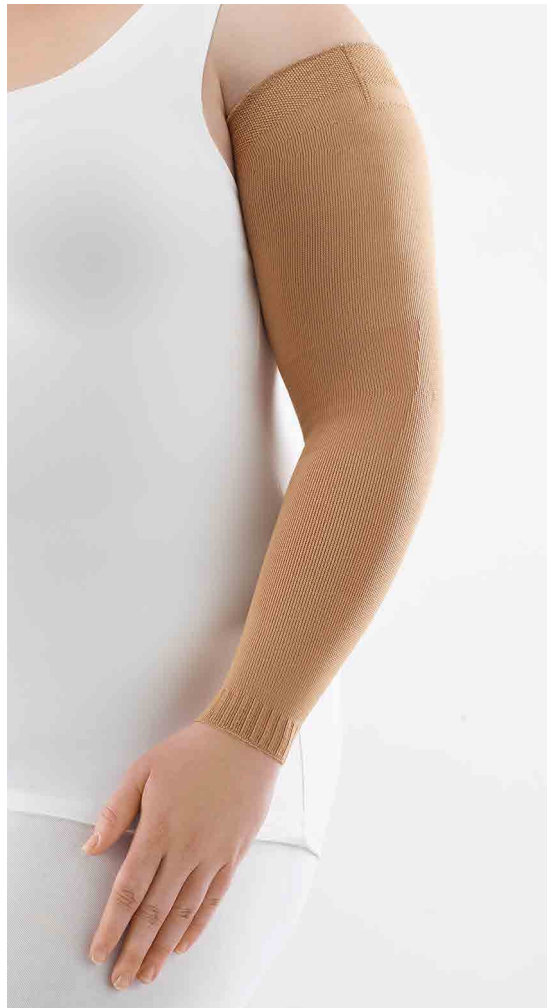

04



04



05

#### 05 REISSVERSCHLUSS PATIENTENSITUATION

- Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Inkontinenz etc.

#### WIRKUNG

- erleichtert das passgerechte An- und Ablegen der Versorgung

#### 06 LYMPHPAD EINGEARBEITET PATIENTENSITUATION

- lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung
- Abweichungen vom anatomischen Standard

#### WIRKUNG

- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen

#### 07 HANDSCHUH NAHTLOS PATIENTENSITUATION

- leichte bis mittlere Fingerödeme
- leichte bis mittlere Ödeme auf dem Handrücken

#### WIRKUNG

- Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken

#### 08 HANDSCHUH MIT NAHT PATIENTENSITUATION

- mittlere bis ausgeprägte Fingerödeme
- mittlere bis ausgeprägte Ödeme auf dem Handrücken

#### WIRKUNG

- Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken





06



07



08

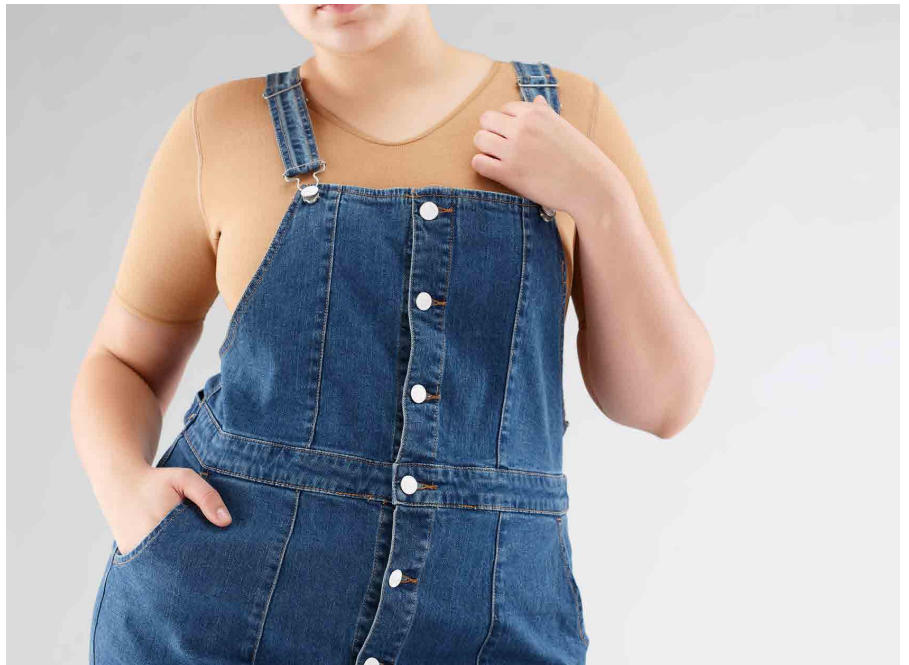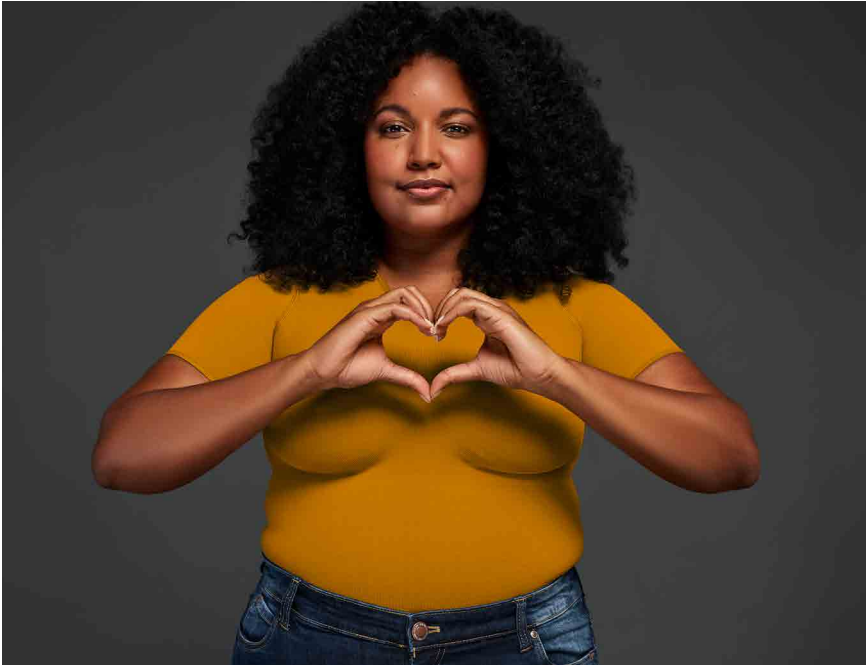

# VenoTrain® curaflow

## FÜR DIE LYMPH- UND LIPÖDEM-THERAPIE THORAX

Bei Brustödemen und Brustwandödemen reichen Lymphentlastungs-BHs meist nicht aus, oft sind individuelle Lösungen gefragt: Hier kann die Thorax-Kompressionsversorgung mit dem VenoTrain curaflow Body der Schlüssel zu mehr Lebensqualität sein.

Der nahtfreie Brustbereich schmiegt sich angenehm an die Brust und gewährt eine gleichmäßige Kompression des Lymphödems ohne jegliche Einschlüsse oder Reibung.

### BESONDERHEITEN

- geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

### STANDARDFARBEN



### ZUSATZFARBEN



### ZUSÄTZE

- ohne Armansatz
- Armansatz mit Kompression
- Armansatz ohne Kompression
- Reißverschluss vorn mittig
- Hakenverschluss
- Armstrumpf annähen

### DETAILS

#### GRÖSSENSYSTEMATIK Maß

#### KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 1 (18–21 mmHg)

#### MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 1: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan

#### PFLEGEHINWEISE



### MASSANFERTIGUNG



BODY



T-SHIRT



BUSTIER

# VenoTrain® curaflow

## ZUSÄTZE THORAX



01

**01****NAHTLOSER BRUSTBEREICH****PATIENTENSITUATION**

- Standard bei allen Thoraxversorgungen

**WIRKUNG**

- Vermeidung von Druck- und Scheuerstellen im Brustbereich
- Stützung der Brust

**02****ARMANSATZ MIT ODER****OHNE KOMPRESSION****PATIENTENSITUATION**

- Ödeme im Brust- und Armbereich

**WIRKUNG**

- Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich

**03****EPITHESENTASCHE****PATIENTENSITUATION**

- bei Verwendung von Brustprothesen

**WIRKUNG**


- optimaler Halt bei Verwendung von Brustprothesen

**04****REISSVERSCHLUSS****PATIENTENSITUATION**

- Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Inkontinenz etc.

**WIRKUNG**


- erleichtert das passgerechte An- und Ablegen der Versorgung

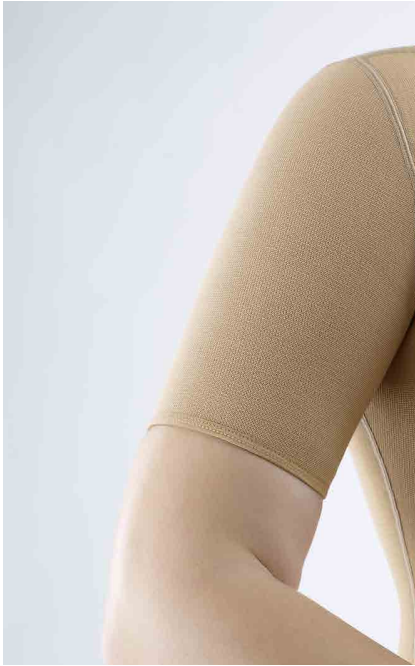


02



02

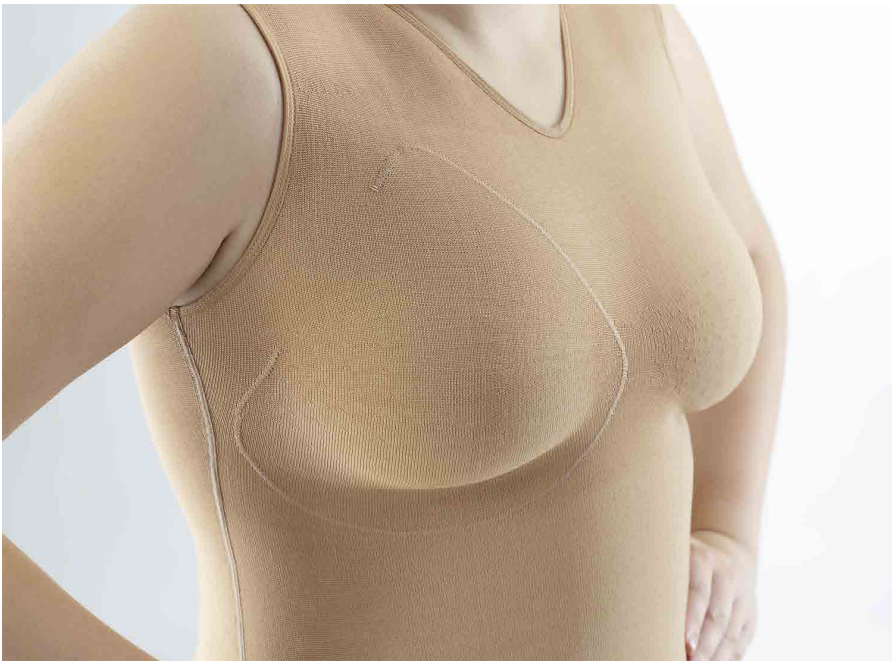

03

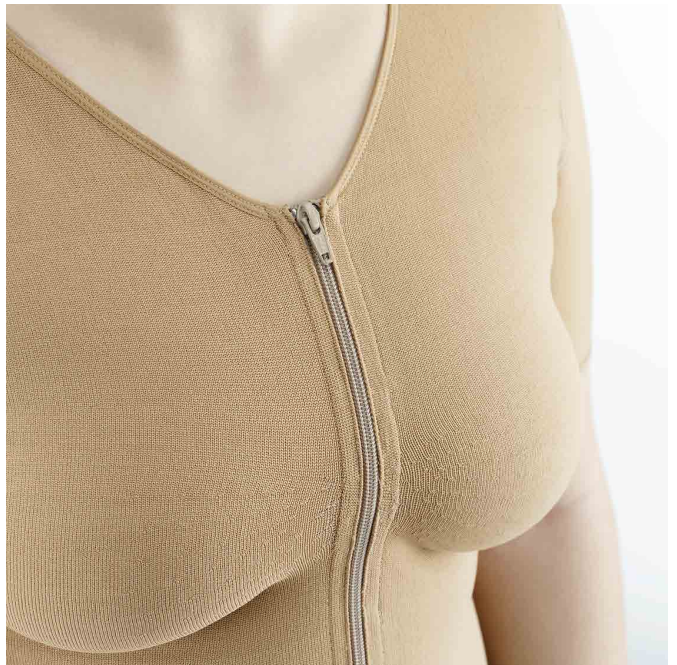

04

# VenoTrain® ZUBEHÖR

## DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DEN ALLTAG

Damit sich die Patienten in den VenoTrain-Kompressionsstrümpfen wohlfühlen, sind die nützlichen Begleiter aus der VenoTrain-Zubehörserie hilfreich. Sie unterstützen wirksam die Therapie, erleichtern die Handhabung und pflegen die Kompressionsstrümpfe sowie die Haut Ihrer Kunden.

### 01 Gummihandschuhe

helfen beim korrekten Anlegen der Kompressionsstrümpfe

### 02 Messtasche

zur Unterstützung der Vermessung

### 03 Startpaket

mit Handschuhen, Fußfeile, Wäschenetz, Antirutsch-Sohlen, Gymnastikband, Kundenpass und Patientenbroschüre

### 04 Wäschenetz

sichere Aufbewahrung der Kompressionsstrümpfe bei jeder Maschinenwäsche

### 05 VenoTrain® Lotion

zusammen mit Sebapharma entwickelt; mit Kamillenextrakt speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse empfindlicher Haut

### 06 Bauerfeind-Pflegeschaum

für besonders beanspruchte Haut; schützt und pflegt mit Panthenol

### 07 Waschmittel


reinigt sanft, ermöglicht eine schonende Pflege und gibt lang anhaltenden Schutz



01



02

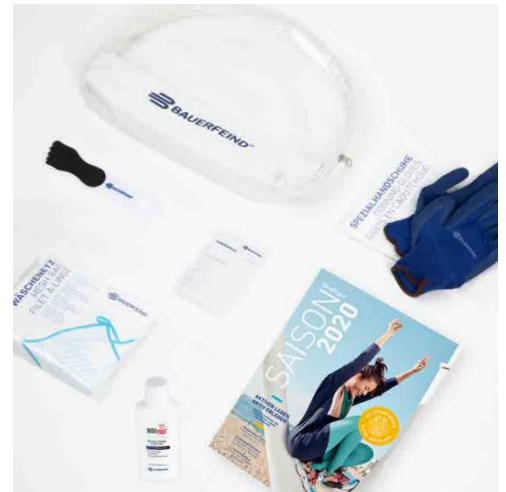

03



04



05



06



07



# VenoTrain® glider

## PRAKTISCHE ANZIEHHILFE

Der VenoTrain glider ist die praktische An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und kann vom Arzt verordnet werden.

Das strapazierfähige und leichte Material lässt den Strumpf mühelos über den Arm und das Bein gleiten. Er eignet sich für Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze.

Zeit- und platzsparend ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

### BESONDERHEITEN

- extrem leicht, stabil und reißfest
- einfach zu handhaben
- ideal für unterwegs
- per Rezept verordnungsfähig

DIE VIDEOS ZUR ANZIEHANLEITUNG FINDEN SIE UNTER:

[video.bauerfeind.com/venotrain-glider](https://video.bauerfeind.com/venotrain-glider)

[video.bauerfeind.com/venotrain-glider-armstrumpf](https://video.bauerfeind.com/venotrain-glider-armstrumpf)



ANZIEHEN: SCHRITT 01



ANZIEHEN: SCHRITT 02



ANZIEHEN: SCHRITT 03



ANZIEHEN: SCHRITT 01



ANZIEHEN: SCHRITT 02



ANZIEHEN: SCHRITT 03

# ZUSATZLEISTUNGEN ÄNDERUNGEN | REPARATUREN INDIVIDUELLER KUNDENSERVICE

## ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

### ● SERIE

		soft Arm	impuls Bein
<b>Oberer Strumpfband</b>	Haftband erneuern	●	●
	Trikotrand in Haftband	●	●
	Haftband	●	●
	Hüftteil entfernen und Haftband annähen		●
<b>AGHB</b>	Hüftgurt erneuern		●
<b>Strumpf kürzen</b>	AD/CG max. um 3 cm	●	●
	AG max. um 5 cm		●
<b>Reparatur, sofern möglich</b>	Loch	●	●
	Laufmasche	●	●
	Naht	●	
	Ziehfaeden	●	●

## NEUBESTELLUNG

### ○ MASSANFERTIGUNG

	Einheit	impuls	delight
<b>Fußspitzengestrick</b> verlängern oder kürzen	Stück	○	
<b>Fußspitze</b> Naht nach außen gelegt	Stück	○	○
<b>Fußspitze</b> breiter, schmaler, anatomisch	Stück	○	○
<b>Leibteil</b> vorn/hinten – zwei Nähte	Stück	○	
<b>AT</b> mit Herrenzwickel (ohne Eingriff oder mit Längsschlitz)	Stück	○	
<b>AT</b> mit Reiterhosenzwickel	Stück	○	
<b>Einnähen einer Schaumstoffpelotte</b>	Stück		○

## ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

### ○ MASSANFERTIGUNG

		impuls Bein	delight Bein
<b>Oberer Strumpf- rand</b>	Haftband erneuern	○	○
	Trikotrand in Haftband	○	○
	Haftband enger oder weiter	○	○
	Hüftteil entfernen und Haftband annähen	○	○
<b>AT</b>	Leibteil verkürzen	○	○
	Leibteil verlängern (außer ATX)	○	
	Zwickel verengen (außer ATX)	○	
	Zwickel erweitern (außer ATX)	○	
	Reiterhosenzwickel (außer ATX)	○	
	AT ändern in AG mit Haftband	○	
<b>AGHB</b>	Hüftgurterneuern	○	○
<b>Strumpf kürzen</b>	AD max. um 3 cm	○	○
	AF max. um 4 cm		○
	AG max. um 5 cm	○	○
<b>Umfärben von hell nach dunkel*</b>		○	○
<b>Pelotten**</b>	Einnähen einer kundeneigenen Pelotte		○
	Einnähen einer Schaumstoffpelotte		○
<b>Änderung an Fußspitze</b>	Fußspitze geschlossen ändern in offen	○	○
	Fußspitze offen einkürzen	○	○
<b>Reparatur, sofern möglich</b>	Loch	○	○
	Laufmasche	○	○
	Naht	○	○
	Ziehfaden	○	○

## ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

### VenoTrain® curaflow

Änderung		Versorgung		
		Bein	Thorax	Arm
<b>Hosen</b>				
Leibteil	Leibteilumfang verengen			
	nachträglich U-Teil einarbeiten			
	Leibteil verkürzen			
	Reißverschluss einarbeiten	○		
	Stomaöffnung in Leibteil einarbeiten			
	Tailienabschluss			
	Zwickel			
	AT in AG mit Hüftbefestigung	○		
	AT in CT, ET oder FT	○		
	AT in AG mit Haftband	○		
<b>Bein / Arm</b>				
Strumpf kürzen (Kettelabschluss)		○		○
Haftband / Tailienband / Gurt				
neue Haftbandstücke einnähen				
neues Haftband / Tailienband annähen		○		○
Haftband max 5 cm enger oder weiter				
Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband				
Schulterkappe ändern in CG mit Haftband				
neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß)				
Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G		○		
Annähen Schulterkappe an CG				○
Lymphpad / Futterstoff		○		○
Fertigstellung		○		○
<b>Fuß (je Fuß)</b>				
Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge		○		
cA-Maß verengen		○		
kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht)		○		
<b>Änderungen Hand</b>				
Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos)				○
Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht)				○
nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern				○
<b>Thorax</b>				
Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler)			○	
Armansatz (je Arm)			○	
Ausschnitte vertiefen			○	
Thorax kürzen			○	
Fertigstellung			○	
<b>Reparaturen / Anpassungen</b>				
Reparatur Naht		○	○	○
Reparatur Laufmasche		○	○	○
Reparatur Loch und Fadenzieher		○	○	○
Reißverschluss einarbeiten		○	○	○
Reißverschluss heraustrennen		○	○	○
Reißverschluss reparieren		○	○	○
Umfärben (nur bei ungetragener Ware)		○	○	○

\* Strümpfe bitte **nicht** anprobieren – nach Hautkontakt ist das Umfärben nicht mehr möglich

\*\* Nur bei provisorischer Naht möglich

# HILFSMITTELNUMMERN VENOTRAIN

## RUNDSTRICKPRODUKTE SERIE

	Ccl	AD 17.06.01...	CG 17.10.01...
impuls	2	...1143	
	3	...2047	
soft   Arm	1		...0015
	2		...1020

## RUNDSTRICKPRODUKTE MASSANFERTIGUNGEN

	Ccl	AD 17.06.10...	AG 17.06.12...	AT 17.06.13...	ATH 17.06.13...	ATX 17.06.13...
impuls	2	...1023	...1022	...1069	...1069	...1069
	3	...2008	...2007	...2023	...2023	...2023

## FLACHSTRICKPRODUKTE MASSANFERTIGUNGEN

	Ccl	AD 17.06.14...	AF 17.06.15...	AG 17.06.16...	AT 17.06.17...	CT 17.06.18...	BT 17.06.18...	ET 17.06.19...	FT 17.06.19...
delight   Bein	2	...1014	...1019	...1014	...1011	...1014		...1014	
	3	...2014	...2019	...2014	...2010	...2015		...2015	
delight   Arm	1	alle Ausführungen 17.10.04.0023							
	2	alle Ausführungen 17.10.04.1020							
curaflow   Bein	1	...0014	...0014	...0014	...0014	...0012	...0012	...0012	...0012
	2	...1019	...1018	...1019	...1017	...1012	...1013	...1013	...1012
	3	...2020	...2018	...2020	...2017	...2013	...2014	...2014	...2013
	4	...3017	...3016	...3017	...3014	...3010	...3010	...3010	...3010

	Ccl	CG 17.10.04...	AG 17.10.04...	Ccl	
curaflow   Arm	1	... 0029	...0030	curaflow   Thorax	1
	2	...1032	...1033		
	3	...2026	...2027		
					17.11.02.xxxx

## ZUSÄTZE

Zusatz	Hilfsmittelnummer
Kompressionspelotten	17.99.99.0002
Komprimierendes Leibteil	17.99.99.2003
Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe	17.99.99.2004
Hüftbefestigung für AF oder AG	17.99.99.2006
Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe	17.99.99.2007
Haftrand	17.99.99.2008
Einbeinhosenteil	17.99.99.2009
Handteil für Armstrümpfe mit Daumenöffnung	17.99.99.2010
Handteil für Armstrümpfe mit Daumenansatz	17.99.99.2011
Handteil für Armstrümpfe mit Daumen und Fingern	17.99.99.2012
Schulterbefestigung / Kappe für Armstrümpfe	17.99.99.2013
Reißverschluss am Armstrumpf	17.99.99.2014
Reißverschluss am Beinstrumpf	17.99.99.2015
Haftbandstücke	17.99.99.2016
Hodensack	17.99.99.2017
Eingriff	17.99.99.2018
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2019
Stomaöffnung	17.99.99.2020
Bolero	17.99.99.2022
Komprimierender Fingerling	17.99.99.2023

## AN- UND AUSZIEHHILFE

glider	02.40.01.3012
glider plus	02.40.01.3034

# EMPFEHLUNGEN ZUR VERSORGUNG

## REZEPTBEISPIELE

### DAS REZEPT MUSS ENTHALTEN:

- **Hilfsmittelnummern**
- **Diagnose**
- **Anzahl der Strümpfe (Stück / Paar)**
- **Produktname**
- **Kompressionsklasse (Ccl)**
- **Länge bzw. Ausführung des Strumpfes**
- **Zusätze (schräge Abschlüsse, Befestigungen, Haftbandstücke, Pelotten etc.)**
- **Angabe zur Maßenfertigung (z. B. flachgestrickt)**

Da es in jeder Kompressionsklasse Materialien mit unterschiedlicher Elastizität und Wirksamkeit gibt, ist eine namentliche Produktverordnung sinnvoll (s. Leitlinien zum medizinischen Kompressionsstrumpf 10/2006).

In Einzelfällen kann eine Kombination aus verschiedenen Kompressionsstrümpfen bzw. -strumpfhosen erfolgen. Diese Kombinationen können z. B. aus zwei

übereinander getragenen Kompressionsstrümpfen bestehen, wenn das Anlegen eines einzelnen Kompressionsstrumpfes in der erforderlichen hohen Kompressionsklasse Schwierigkeiten bereitet.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind z. B. eine Kompressions-Caprihose mit einem Kompressions-Wadenstrumpf, oder eine Kompressions-Bermuda mit einem Kompressions-Schenkelstrumpf (s. Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes).

Bei mittelgradiger Beanspruchung sollte ein wirksamer Kompressionsdruck für die Dauer von sechs Monaten gewährleistet sein. Aus hygienischen Gründen ist eine Wechsellieferung notwendig. Bei schwerer körperlicher Arbeit sowie signifikanter Änderung der anatomischen Maße kann eine Neuverordnung allerdings auch schon zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich werden (s. Leitlinie: Diagnostik und Therapie der Lymphödeme, 5/2017).

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfsmittel	Impfstoff	Spr-St. Bedarf	Begr-Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
			6	X	8	9		
Geb.-pfl.	Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		Gesamt-Brutto			
noctu	<b>REZEPTBEISPIEL BEINVERSORGUNG</b>		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor		Taxe	
Sonstige	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	1. Verordnung					
Unfall	Status		2. Verordnung					
Arbeits-unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	3. Verordnung					
	Datum						Vertragsarztstempel	
<b>Rp.</b> (Bitte Leerräume durchstreichen)								
aut idem	Hilfsmittelnummer		Beginnendes Lymphödem					
aut idem	1. Verordnung <b>1706121022</b>		Medizinischer Kompressionsstrumpf					
aut idem	2. Verordnung <b>1799992008</b>		<b>VenoTrain impuls</b>					
aut idem			1 Strumpf (Stück) links					
			AG mit Noppenhaftband, Ccl 2, Fuß geschlossen					
			Maßenfertigung					
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (10,2014)				
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer						

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr-St- Bedarf	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Geb.- pfl.	Name, Vorname des Versicherten	geb. am	6	X	8	9	
noctu	<b>REZEPTBEISPIEL BEINVERSORGUNG</b>						
Sonstige	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status				
Unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum				
Arbeits- unfall				Vertragsarztstempel			
<b>Rp.</b> (Bitte Leerräume durchstreichen)							
aut idem	Hilfsmittelnummer		Lymphödem, Stadium I				
aut idem	1. Verordnung <b>1706161014</b>		Medizinischer Kompressionsstrumpf				
aut idem	2. Verordnung <b>1799992008</b>		<b>VenoTrain delight</b>				
		1 Strumpf (Stück) rechts			AG mit Noppenhaftband, Ccl 2, Fuß schräg offen		
		Maßanfertigung flachgestrickt			Unterschrift des Arztes Muster 16 (10,2014)		
<b>Bei Arbeitsunfall auszufüllen!</b>		Abgabedatum in der Apotheke					
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer						

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr-St- Bedarf	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Geb.- pfl.	Name, Vorname des Versicherten	geb. am	6	X	8	9	
noctu	<b>REZEPTBEISPIEL BEINVERSORGUNG</b>						
Sonstige	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status				
Unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum				
Arbeits- unfall				Vertragsarztstempel			
<b>Rp.</b> (Bitte Leerräume durchstreichen)							
aut idem	Hilfsmittelnummer		Lymphödem, Stadium II				
aut idem	1. Verordnung <b>1706161019</b>		Medizinischer Kompressionsstrumpf				
aut idem	2. Verordnung <b>1799992008</b>		<b>VenoTrain curaflo</b>				
		1 Strumpf (Stück) links			AG mit Noppenhaftband, Ccl 2, Fuß schräg geschlossen		
		schräger Abschluss bei G			Unterschrift des Arztes Muster 16 (10,2014)		
		Maßanfertigung flachgestrickt					
<b>Bei Arbeitsunfall auszufüllen!</b>		Abgabedatum in der Apotheke					
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer						

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr-St- Bedarf	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK
Geb.- pfl.	Name, Vorname des Versicherten	geb. am	6	X	8	9	
noctu	<b>REZEPTBEISPIEL BEINVERSORGUNG</b>						
Sonstige	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.	Status				
Unfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum				
Arbeits- unfall				Vertragsarztstempel			
<b>Rp.</b> (Bitte Leerräume durchstreichen)							
aut idem	Hilfsmittelnummer		Lip- und Lymphödem, Stadium II				
aut idem	1. Verordnung <b>1706161019</b>		Medizinischer Kompressionsstrumpf				
aut idem	2. Verordnung <b>1799992008</b>		<b>VenoTrain curaflo</b>				
		1 Strumpf (Stück) links			ET mit Tailenband, AG mit Noppenhaftband, Ccl 2,		
		Fuß schräg geschlossen			Unterschrift des Arztes Muster 16 (10,2014)		
		schräger Abschluss bei G					
		Maßanfertigung flachgestrickt					
<b>Bei Arbeitsunfall auszufüllen!</b>		Abgabedatum in der Apotheke					
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer						

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr-St- Bedarf	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK		
Geb.- pl.	Name, Vorname des Versicherten		6	X	8	9				
noctu	<b>REZEPTBEISPIEL ARMVERSORGUNG</b>		Zuzahlung		Gesamt-Brutto					
Sonstige			Kostenträgerkennung		Versicherten-Nr.		Status			
Unfall	Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum		Vertragsarztstempel			
Arbeits- unfall	Abgabedatum in der Apotheke		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor				Taxe	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernnummer		1. Verordnung				
aut idem	Hilfsmittelnummer		Beginnendes Lymphödem							
aut idem	1. Verordnung <b>1710011020</b>		Medizinischer Kompressionsstrumpf							
aut idem			<b>VenoTrain soft</b>							
				1 Armstrumpf (Stück) rechts						
				CG, Ccl 2						
				Unterschrift des Arztes Muster 16 (10,2014)						

Gebühr frei	Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr-St- Bedarf	Begr- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK		
Geb.- pl.	Name, Vorname des Versicherten		6	X	8	9				
noctu	<b>REZEPTBEISPIEL ARMVERSORGUNG</b>		Zuzahlung		Gesamt-Brutto					
Sonstige			Kostenträgerkennung		Versicherten-Nr.		Status			
Unfall	Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum		Vertragsarztstempel			
Arbeits- unfall	Abgabedatum in der Apotheke		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.		Faktor				Taxe	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernnummer		1. Verordnung				
aut idem	Hilfsmittelnummer		Lymphödem, Stadium II, Zustand nach Mama-CA							
aut idem	1. Verordnung <b>1710041032</b>		Medizinischer Kompressionsstrumpf							
aut idem	2. Verordnung <b>1799992012</b>		<b>VenoTrain curaflo</b>							
aut idem			1 Armstrumpf (Stück) links							
				CG und Handschuh AC1, mit Finger und Daumen, Ccl 2						
				schräger Abschluss bei G, Haftbandstück						
				Maßanfertigung flachgestrickt						
				Unterschrift des Arztes Muster 16 (10,2014)						



# BESTELLBLÖCKE

Für unsere Kunden haben wir für die Serienbestellung und für die Maßbestellung verschiedene Bestellblätter entwickelt. Damit kann man schnell und unkompliziert das gewünschte VenoTrain-Produkt in der benötigten Ausführung anfordern. Gern schicken wir Ihnen diese Bestellblöcke kostenfrei zu.

Die verschiedenen Bestellblätter können Sie sich natürlich jeder Zeit gern auch downloaden:  
[bauerfeind.de/downloads](https://bauerfeind.de/downloads)

<b>SERIEN-BESTELLBLOCK</b>		<b>Artikelnummer</b>
	VenoTrain	271 2020 0000 005
<b>MASS-BESTELLBLÖCKE</b>		<b>Artikelnummer</b>
<b>Rundstrick-Versorgung</b>	VenoTrain	271 2020 0000 002
	VenoTrain soft Arm	271 1220 3020 001
<b>Flachstrick-Versorgung</b>	VenoTrain delight Bein	271 2020 0000 003
	VenoTrain delight Arm	271 2020 0000 008
	VenoTrain delight Handschuh	271 2020 0000 009
	VenoTrain delight Zehenkappen	271 2020 0000 010
	VenoTrain curaflow Bein	271 4220 7000 001
	VenoTrain curaflow Zehen	271 4220 7000 002
	VenoTrain curaflow Arm / Hand	271 4220 7000 003
VenoTrain curaflow Thorax	271 4120 3000 003	

## VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BAUERFEIND AG (AGB) GELTUNGSBEREICH: DEUTSCHLAND

### Preise

verstehen sich netto in Euro ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

### Versand

auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch dann, wenn dieser die Beförderungskosten nicht trägt. Betriebsstörungen bei uns oder einem unserer Lieferanten, Personalmangel, Streik, Aussperrung sowie höhere Gewalt berechtigen uns, die Lieferzeiten zu verlängern und entbinden uns für die Dauer der Behinderung von jeder Lieferverpflichtung.

### Versandkosten

berechnen wir pauschal bei einem Nettoauftragswert des Gesamtauftrages bis 50 Euro in Höhe von 7 Euro und bis 200 Euro in Höhe von 4 Euro. Maßanfertigungen sind versandkostenfrei. Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

### Retouren

außerhalb der Gewährleistung werden grundsätzlich erst nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung der Rücksendung (Avisierung) unter Beifügung der Lieferpapiere entgegengenommen, wobei wir den einwandfreien Zustand der Ware voraussetzen. Ein generelles Verweigerungsrecht für solche Retouren behalten wir uns vor.

Wir berechnen für den Bearbeitungsaufwand von Retouren außerhalb der Gewährleistung bei Rücksendung bis 1 Monat ab Lieferdatum 10 Euro pro Rücksendung. Bei Rücksendungen ab 1 Monat nach Lieferdatum werden 20 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal aber 25 Euro pro Artikel und Stück als Bearbeitungsgebühr berechnet, bei Rücksendung ab 6 Monaten bis 12 Monaten nach Lieferdatum werden 40 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 50 Euro pro Artikel und Stück berechnet.

Die Entgegennahme von Retouren außerhalb der Gewährleistung, insbesondere für Maß- und Sonderanfertigungen, sowie für Rücksendungen über 12 Monate nach Lieferdatum ist ausgeschlossen.

### Zahlungen

sind nach Lieferung sofort fällig. Bei Teilnahme am Bankeinzugsverfahren gewähren wir 4 Prozent Skonto, bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 3 Prozent Skonto. Ansonsten gilt als Zahlungsziel 30 Tage netto. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsdatum befindet sich der Käufer im Zahlungsrückstand. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Lieferung nur noch gegen Vorauskasse.

Wir berechnen ab dem Zeitpunkt eingetretenen Zahlungsrückstandes Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz. Bei der Zahlung per Scheck, Wechsel usw. gilt diese erst als erbracht, wenn der Betrag unwiderprüflich unserem Konto gutgeschrieben wurde.

### Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. Der Eigentumsvorbehalt gilt anteilmäßig auch dann, wenn die Ware be- oder verarbeitet worden ist. Im Falle der Weiterveräußerung gelten die daraus entstehenden Forderungen an Dritte bis zur Höhe unserer Gesamtforderungen als vorbehalten an uns abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer trotz Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner

bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Der Käufer darf die Liefergegenstände weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügungen durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als der Wert die zu sichernde Forderung, so weit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 Prozent übersteigt.

### Reklamation

Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn sie nicht unverzüglich gemäß § 377 HGB uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden. Im Übrigen verjähren Gewährleistungsansprüche 1 Jahr nach Übergabe des Kaufgegenstandes. Ist die Ware mangelhaft, so liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach. Reparaturen können aus hygienischen Gründen nur an gewaschenen bzw. hygienisch einwandfreien Artikeln ausgeführt werden. Bei der Einsendung von ungewaschener Ware behalten wir uns die Berechnung einer angemessenen Aufwandspauschale vor. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung nachkommen, insbesondere zur Behebung von Mängeln oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache, hat der Kunde kein Recht, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vorliegt. Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler, die auf normalen Verschleiß und Überbelastung, missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung der Pflege sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

### Haftung

für Schadenersatz ist ausgeschlossen, sofern uns oder unseren Vertretern und Erfüllungsgehilfen weder grob fahrlässiges noch vorsätzliches Handeln zur Last fällt. Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft nicht Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

### Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung ist Gera.

### Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck entspricht.

### Datenschutzklausel / Gesprächsaufzeichnung

Zu Qualitätszwecken zeichnen wir stichprobenartig Telefonate zwischen dem Käufer und unseren Mitarbeitern auf. Diese Telefonaufzeichnungen dienen ausschließlich dem Zweck, unsere Leistung zu verbessern und werden nach ihrer Auswertung gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Käufer willigt hiermit in die Aufzeichnungen von Telefonaten zu ausschließlich diesem Zweck ein. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft vom Käufer widerrufen werden.


Weitere Informationen zu den jeweils aktuellen Datenschutzgrundsätzen der Bauerfeind AG unter [www.bauerfeind.de/ds](http://www.bauerfeind.de/ds)

**HALLO PERFEKTE VERSORGUNG!  
HALLO PERFEKTER TRAGEKOMFORT!**



# MEHR LEBENSQUALITÄT FÜR IHRE KUNDEN!

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?  
Kontaktieren Sie uns:

 **Bauerfeind AG**  
Triebeser Straße 16  
07937 Zeulenroda-Triebes  
Germany

**T** +49 (0) 36628 66-20 00  
**F** +49 (0) 36628 66-29 99  
**E** [info@bauerfeind.com](mailto:info@bauerfeind.com)

